



GLOOR REHAB. & CO AG

In guten Händen

www.gloorrehab.com

AXI2GO

Jetzt neu:
mit SmartShield



Transportstuhl

Inspired by life

GLOOR REHAB. & CO AG
In guten Händen



Axi2Go, die ideale Mobilitätslösung für öffentliche Räume

Mit unserem Transportstuhl sorgen wir für mehr Mobilität und somit mehr Komfort und Lebensfreude für Menschen, die nicht mehr so gut zu Fuß sind - in Kliniken, Einkaufszentren, Möbelhäusern und Messen. Der Axi2Go ist ein vandalismus- und diebstahlbeständiger Transportstuhl, der dank seines einzigartigen

selbstordnenden Systems hervorragend für Ihre öffentlich zugänglichen Räume geeignet ist. Aufgrund ihres auffälligen und modernen Designs werden die Axi2Go-Transportstühle Ihr Image als moderne, serviceorientierte Organisation unterstreichen.



Der Axi2Go wird der Klasse 1 zugeteilt nach der Europäischen Verordnung (EU) 2017/745

Bequem sitzen

Der Benutzer eines Transportstuhls möchte - auch vorübergehend - bequem sitzen. Deshalb ist der Axi2Go mit einem vorgeformten Sitz, Rücken- und Armlehnen versehen, die einen überraschend guten Sitzkomfort gewährleisten. Für noch mehr Sitzkomfort können Sie die 3D-gewebten Sitz- und Rückenbezüge erwerben.



Geprüfte Sicherheit

Der Bremsbügel sorgt dafür, dass der Axi2Go automatisch abgebremst wird. Als Betreuer behalten Sie deshalb immer die Kontrolle über den Transportstuhl. Neben Kontrolle spielt auch Stabilität eine wichtige Rolle. Aufgrund des optimalen Radstands können unerfahrene Stuhlfahrer den Axi2Go ruhigen Herzens sowohl in Gebäuden als auch im Freien benutzen. Auch das Hinsetzen und Aufstehen erfolgt leicht und sicher.

Hinweis: Aus Sicherheitsgründen empfiehlt **Gloor Rehab.**, im Freien einen Sicherheitsgurt zu tragen.



Jetzt neu: Axi2Go mit SmartShield

Unser Axi2Go ist der weltweit erste Transportstuhl mit der Möglichkeit einer antibakteriellen Beschichtung. Wir haben eine Lösung entwickelt, die MRSA-Bakterien auf Basis einer Technologie mit Silberionen abbaut und so eine Ausbreitung verhindert.

Die SmartShield-Beschichtung wird auf dem gesamten Transportstuhl, einschließlich der neu konzipierten Armlehnen aus Metall, aufgetragen. Der Pulverlack wurde vom anerkannten deutschen Fraunhofer-Institut geprüft und attestiert und hat sich mit einer Reduktion der Keime (bspw. Staphylococcus aureus, MRSA) um mehr als 99,99 Prozent bewährt.*

Unser Axi2Go mit SmartShield bietet sich damit vor allem für den Einsatz auf Stationen in Kliniken an. Patienten können auf unserem weiterentwickelten Transportstuhl geschützt vor MRSA-Bakterien bequem und sicher transportiert werden.



Hinweis:

Der Axi2Go mit SmartShield ist ausschließlich in der Farbe RAL 9010 erhältlich. Der antibakterielle Pulverlack ist nicht beim Zubehör, z.B. Münzschloss, Anti-Diebstahlstange oder Gepäckträger, möglich.

* Q-lab; Prüfberichtsnummer: 170303-10242-22196-01





Langlebig und vandalismusbeständig

Heutzutage müssen Transportstühle nicht nur langlebig und wartungsarm, sondern leider auch vandalismusbeständig sein. Deshalb sind Rahmen, Sitz und Rückenlehne des Axi2Go ganz aus hochwertigem Stahl gefertigt, und die beweglichen Teile sind auf ein Minimum reduziert. Der Axi ist mit wartungsfreien lecksicheren Reifen versehen, wodurch der Stuhl immer problemlos rollt und sich mühelos steuern lässt. Dank der hochkorrosionsbeständigen

Kataphorese-Lackierung kann der Axi2Go sowohl im Innen- als auch im Außenbereich verwendet werden.

Keine leichte Beute für Diebe
Mittels des Münzschlosses und/oder eines Antidiebstahlpfahls lässt sich die Gefahr eines Diebstahls wesentlich verringern.



TIPP

Sie können nicht nur den Axi2Go, sondern auch den Antidiebstahlpfahl mit einem Aufdruck nach eigenem Entwurf verschönern.


Große Auswahl RAL-Farben




Da der Axi2Go in vielen RAL-Farben lieferbar ist, können Sie eine Farbe wählen, die zu Ihrem eigenen Hausstil passt. Stärken Sie Ihr Image mit dem Axi2Go und beleben Sie Ihren Empfangsbereich.

Die sehr korrosionsbeständige kataphoretische Beschichtung gewährleistet, dass der Axi2Go sowie das gesamte Befestigungsmaterial witterungsbeständig ist.

Axi2Go Zubehör

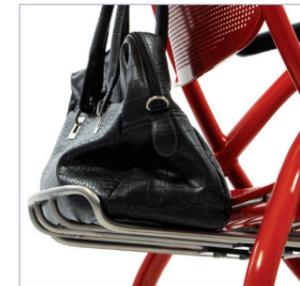

Gepäckträger

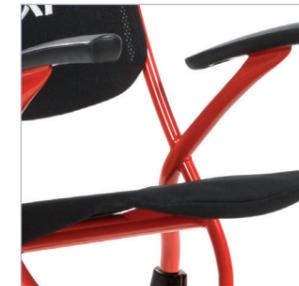


Sitzbezug



Rückenbezug




Haltungsgurt

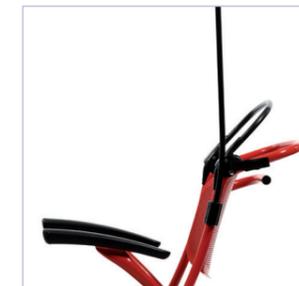

Antidiebstahlpfahl



Antidiebstahlpfahl mit 2 Infusionshaken versehen

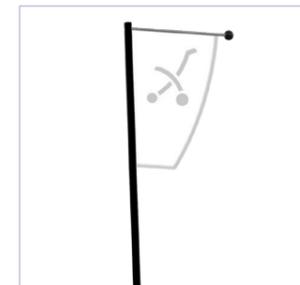

Antidiebstahlpfahl mit Befestigungsrohr



Logo-Platte



Standplatz



Mauerhalterung mit Anfangskette




Münzschloss / Münze





Der Axi2Go in 6 Schritten

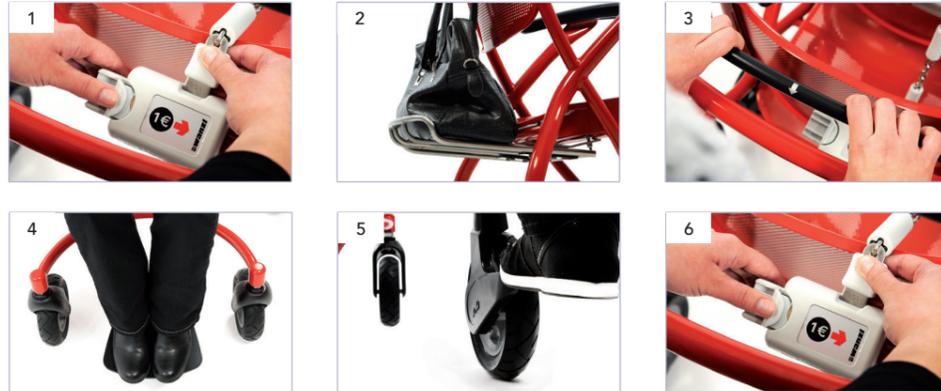

- 1 Stecken Sie, falls erforderlich, eine Münze in das Münzschloss und entkuppeln Sie den Axi2Go.
- 2 Stellen Sie Ihr Gepäck auf den Gepäckträger (falls vorhanden). So haben Sie die Hände frei.
- 3 Um mit dem Axi2Go fahren zu können, drücken Sie den schwarzen Bremsbügel nach unten und halten ihn fest.
- 4 Der Stuhlbenutzer kann sich setzen. Stellen Sie die Füße auf die Fußplatte, bevor Sie losfahren.
- 5 Ein eventuelles Hindernis können Sie mithilfe der Kippvorrichtung überwinden.
- 6 Stellen Sie den Axi2Go nach dem Gebrauch wieder ab. Sie erhalten dann Ihre Münze zurück.

Technische Daten



BR	Breite des Rollstuhls	73,5 cm
LR	Länge des Rollstuhls	90 cm
EL	Extra Länge pro ineinander schiebbaren Stuhl	+ 28 cm
SH	Sitzhöhe	51 cm
	Sitzbreite	45 cm
	Sitztiefe	45 cm
	Sitzneigung	9°
	Rückenhöhe	48 cm
	Armlehnenhöhe	25 cm
	Unterschenkellänge	45 cm
	Höhe der Schubstange + des Bremsbügels	98 cm
	Gesamtgewicht	24 kg
	Höchstgewicht des Benutzers	150 kg
	Max. Beladung Gepäckträger	15 kg



Der Axi2Go wird der Klasse 1 zugeteilt nach der Europäischen Verordnung (EU) 2017/745



Inspired by life

Gloor Rehab. & Co AG

Mattenweg 5 • CH-4458 Eptingen BL • Tel. +41 299 00 50
mail@gloorrehab.ch • gloorrehab@hin.ch (für Mails mit Patientendaten)

